

# ageLOC® Galvanic Spa™



Nu Skin® ageLOC Galvanic Spa využívá průlomovou technologii, aby vaší pleti dodala naše patentované složky proti stárnutí.

## SEZNAMTE SE S AGELOC GALVANIC SPA

Malý, chytrý a výkonný ageLOC Galvanic Spa od Nu Skin dává dohromady průlomovou technologii s patentovanými složkami a vytváří tak skutečně moderní přístroj proti stárnutí. Při používání společně s produkty, jakými jsou naše Galvanic Facial Gels with ageLOC a Tru Face Line Corrector, Galvanic Spa cílí přímo u zdroje na viditelné známky stárnutí pleti. Jemné linky a vrásky se zdají menší, pleť je posílena a vypadá nádherně mladě a pokožka na těle i ve vlasové části je vyživená.

Tajemství této mladě vypadající pleti tkví v inovativní vědě Nu Skin. Váš přístroj využívá samočinný galvanický proud, s kterým se často setkáváme v profesionálních lázních, pomáhající dopravit do pleti složky proti stárnutí, které lze nalézt v našich doprovodných pleťových gelech (Facial Gels), s výsledky, které hovoří za vše. S přídatnými nastaveními a doplňkovými produkty navrženými pro obličej, tělo a vlasovou pokožku vám tento víceúčelový kosmetický přístroj pro domácí používání umožní zažít pocit jako v lázních z pohodlí svého domova.

Od svého uvedení na trh v roce 2003 procházel Galvanic Spa, jeho různé nástavce a doprovodné produkty pravidelnými modernizacemi a vylepšeními, až z něho vznikl přístroj, který znáte dnes. Díky srozumitelnému, uživatelsky přijatelnému LED displeji a optimálně ergonomickému tvaru, který lépe kopíruje obrysy vlasové pokožky, těla a obličeje, je Galvanic Spa moderní, intuitivní a nenáročný na obsluhu. Tajemství rozzářené, mladě vypadající pleti spočívá na špičkách vašich prstů – a jeho odhalení nebylo nikdy snazší.

## PROČ SI HO ZAMILUJETE

- Laboratorní výzkum ukazuje, že použití galvanických proudů může pomoci s dodáním složek proti stárnutí do pleti.
- Demonstrování výsledků působení Galvanic Spa s ostatními doplňkovými kosmetickými produkty je rychlé a snadné.
- Používejte ageLOC Galvanic Spa a jeho doplňkové kosmetické produkty s benefity proti stárnutí, to vše z pohodlí vlastního domova

- Víceúčelový přístroj pro obličej, tělo a vlasovou pokožku se čtyřmi vyměnitelnými nástavci:
  - **ageLOC Face Conductor (nástavec na obličej)** – velký nerovný a rýhovaný povrch udržuje produkt v kontaktu s pletí a pomáhá dodat ageLOC složky obsažené v našich Galvanic Spa Facial Gels do pleti.
  - **Focus Area Conductor (nástavec na specifické části)** – plochá, hladká, oválná hlavice se soustřeďuje na povrchovou kontaktní plochu, umožňuje lepší kontakt s pletí, pomáhá dodat klíčové složky z Tru Face Line Corrector do konkrétních částí.
  - **Body Conductor (nástavec na tělo)** – tvořený třemi oblými vyvýšeninami pro optimalizaci aplikace přípravku; tento nástavec je při používání s ageLOC Body Shaping Gel snadno ovladatelný.
  - **Scalp Conductor (nástavec na vlasovou pokožku)** – nástavec ve tvaru hřebenu snadno klouže ve vlasech a zároveň se stará o nezbytný kontakt mezi klíčovými složkami Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum a vlasovou pokožkou.

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- **Osvětlený displej** – zářivě jasný LED displej je moderní, lehce čitelný a intuitivní.
  - **Intuitivní použití** – už žádné domýšlení se. Časování a polarita jsou automaticky předprogramovány, aby se přizpůsobily vámi zvolené péči.
  - **Optimálně ergonomický tvar\*** – tvar nástavce je navržen tak, aby lépe kopíroval kontury obličeje, vlasové pokožky či těla, čímž přístroj neustále udržuje v kontaktu s pokožkou.
  - **Automatické přizpůsobení se pleti** – dodává odpovídající množství proudu pro efektivní aplikaci.
  - **Zvuková znamení** – přístroj každých 10 sekund zapípá, má nové upozornění na „konec programu“ a „nízké nabití baterie“.
  - **Dvouletá záruka** – od původního data nákupu.
- \* 91 % uživatelů v průzkumu věnovanému domácímu používání spotřebiteli ohodnotilo ergonomický tvar ageLOC Galvanic Spa jako „dobrý“ až „výborný“ (14denní průzkum domácího používání přístroje vyhodnoceného 27 účastníky, provedený v září 2009).

## JAK PRODUKT POUŽÍVAT

Používejte ageLOC Galvanic Spa s přípravky Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC, Tru Face® Line Corrector, ageLOC Body Shaping Gel a Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum. Na kompletní pokyny, jak přístroj používat, se prosím podívejte do své uživatelské příručky.

## VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Ne každý potřebuje stejnou hladinu proudu. Díky přizpůsobení proudu specifickým podmínkám přístroj ageLOC Galvanic Spa každému uživateli poskytne maximálně příjemný a účinný zážitek. Pro správné nastavení hladiny proudu každé osobě zařízení skrze pleť vyšle kontrolovaný výboj a měří, jak dlouho trvá, než se vrátí. Přístroj pak vybere hladinu proudu, která bude pro vaši pleť nejpříjemnější. Tento jednoduchý proces nahrazuje léta školení, kterými prochází kosmetičky, aby mohly účinně používat galvanickou terapii v lázeňském prostředí.

## KOMPATIBILNÍ PRODUKTY S AGELOC GALVANIC SPA

Kosmetické produkty kompatibilní s ageLOC Galvanic Spa jsou určitým způsobem nabitě, aby s přístrojem fungovaly. Toto jsou jediné produkty, které s ním fungují:

- Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC
  - Cílí na hlavní zdroje viditelných známek stárnutí pleti a pomáhá stresované, unavené pleti vypadat mladší a vyživená.
- Tru Face Line Corrector
  - Pomáhá snižovat výskyt jemných linií a vrásek. Pro optimální výsledky kombinuje přístroj ageLOC Galvanic Spa a Tru Face Line Corrector.
- ageLOC Body Shaping Gel
  - Vytvořený pro optimální fungování s přístrojem Nu Skin Galvanic Body Spa, aby přinesli ageLOC benefity proti stárnutí do pleti, zmírnili výskyt celulitidy, pomohli osvěžit pleť a snížili výskyt viditelných známek stárnutí.

- Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum
  - Obsahuje složení, které je unikátně zkombinováno s ageLOC Galvanic Spa, čímž vlasové pokožce a kořínkům dodává esenciální složky, a vlasy díky tomu vypadají plnější a v lepší kondici.

## DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

- **ageLOC Future Serum** – ageLOC složky pomáhají cílit na hlavní zdroje viditelných známek stárnutí pleti. Je klinicky prokázáno, že toto luxusní sérum odhaluje mladistvěji vypadající pleť osmi významnými způsoby: podporováním mladistvé struktury pleti, vyhlazováním její povrchové struktury, snižováním výskytu drobných linek a vrásek, zvyšováním jasů, minimalizováním pórů, vyrovnáváním tónu pleti, snižováním výskytu nežádoucích skvrn a zvyšováním hydratace pleti.
- **ageLOC Radiant Day SPF 22** – lehká emulze pro denní použití, která pleť hydratuje a omezuje výskyt viditelných známek stárnutí pleti, a zároveň látky pro rozjasnění pleti přinášejí viditelně jasnější a zářivější pleť. Toto hedvábně jemné složení se SPF 22 pleť rovněž chrání před nežádoucími účinky při nadměrném pobytu na slunci.
- **ageLOC Transforming Night** – speciálně vytvořený pro vyhlazení jemných linek, vrásek a zmenšení pórů; tento prvotřídní lehký noční krém posiluje přirozenou bariéru pleti, zvyšuje její elasticitu a zároveň povzbuzuje její přirozenou schopnost vázat vlhkost pro intenzivní hydrataci.
- **ageLOC Dermatic Effects** – vědecky vytvořený tak, aby zajistil přísun ageLOC benefitů proti stárnutí do pleti. Toto denní hydratační a kontury zpevňující tělové mléko obsahuje složky pro zmírnění vzhledu pomerančové kůže a zároveň pokožku vyhlazuje.
- **ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo** – poskytuje optimální výživu na podporu plného objemu a zdravě vypadajících vlasů a současně s tím exkluzivní směsice složek dodává vašim kadeřím extra objem a lesk.
- **ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner** – vyživuje při každém použití – dodává vlasům dodatečný objem a lesk a zlepšuje stav poškozených vlasů.


## JAK TO FUNGUJE?

ageLOC Galvanic Spa využívá důležitou vlastnost elektrických nábojů: souhlasné náboje se odpuzují a opačné se přitahují.


Pokud je klíčová složka nabita záporně, záporný cyklus zařízení ageLOC Galvanic Spa bude tuto složku odpuzovat. Totéž nastane, jestliže je složka nabita kladně a cyklus je kladný.

Příklad pro Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC:

1. Předpřipravený gel a Galvanic Spa (s programem nastaveným na 1) jsou oba nabity záporně, a tak se navzájem odpuzují, čímž vpravují gel do epidermis.

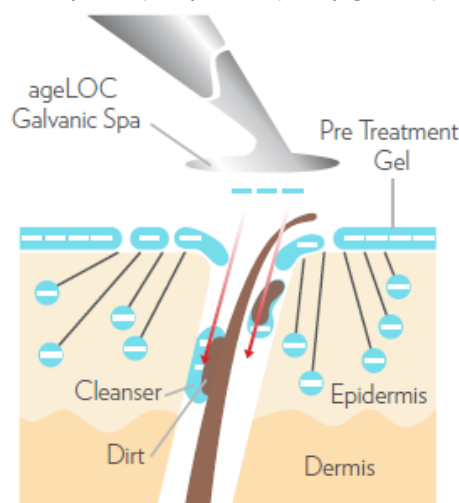

2. Ve 2. fázi ošetřující gel i přístroj (s programem nastaveným na 2) jsou oba nabity kladně, to znamená, že se navzájem odpuzují, čímž vpravují ošetřující gel do svrchní části pleti. Mezitím kladný náboj přístroje přitahuje záporné náboje předpřipraveného gelu, který zůstává v pleti (společně s nečistotami, které váže).

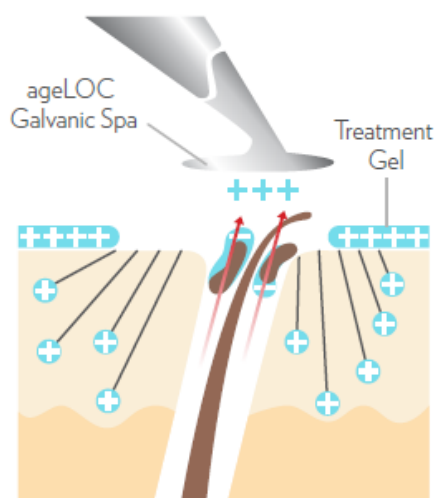

## ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

### K čemu je dobré mít rýhovaný nástavec na obličej?

Drážky na obličejovém nástavci ageLOC Galvanic Spa vytvářejí plošku, která zachytí více ageLOC produktu mezi nástavcem a pletí. Díky většímu množství produktu v této zásadní partii je optimalizován přísun klíčových ageLOC složek do pleti. Pohybem ageLOC obličejového nástavce po pleti je zachycen čerstvě vymáčkнутý přípravek a posunut přímo do kritické oblasti mezi pletí a nástavcem. To pomáhá udržet optimální koncentraci ageLOC aktivních složek na pleti a pod nástavcem.

### Jak dlouho vydrží baterie?

Životnost baterií závisí na druhu, který si zvolíte, a také na frekvenci používání; při běžném používání by však měly vydržet alespoň měsíc.


### Proč přístroj ageLOC Galvanic Spa pípá?

Když spustíte program, uslyšíte jedno, dvě nebo tři pípnutí, kdy přístroj automaticky nastavuje hladinu proudu odpovídající vašemu typu pleti. Během používání přístroje uslyšíte pípnutí i každých 10 sekund. Navíc uslyšíte jedno dlouhé a dvě krátká pípnutí, když je program u konce.

### Jak vyměním jednotlivé nástavce?

Sejmutí nástavce: Jednou rukou uchopíte nástavec, druhou držte přístroj tak, aby byla pochromovaná aktivační destička směrem k vám. Palcem silně stisknete uvolňovací tlačítko, dokud se nástavec z přístroje neuvolní.

Upevnění nástavce: Uchopte přístroj tak, aby strana s displejem směřovala nahoru a polohovací ukazatel (malý zářez) nástavce směřoval k vám. Pevně zatlačte, aby nástavec zaklapl do správné polohy. V případě, že nástavec řádně nezaklapne, zkontrolujte jeho správnou pozici. Použití síly by mohlo poškodit přístroj i nástavec. Přístroj nebude fungovat, dokud nebude nástavec správně nasazen.

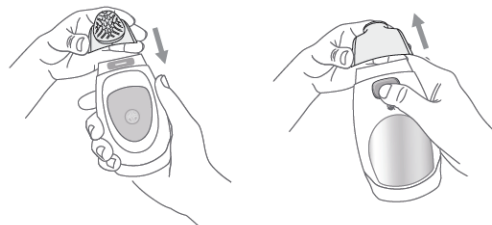

## VAROVÁNÍ

Jak snížit zdravotní rizika: Před použitím ageLOC Galvanic Spa nebo ošetřením tímto přístrojem se o vhodnosti poraďte se svým lékařem, pokud jste těhotná, máte kardiostimulátor nebo podobné zařízení, trpíte epilepsií, nosíte rovnátka nebo máte kovový implantát. Přístroj ageLOC Galvanic Spa by neměl být používán na partiích s mnoha prasklými kapilárami nebo na partiích se zanícenými nebo otevřenými ranami. Produkt používejte pouze tak, jak je to popsáno v uživatelské příručce pro ageLOC Galvanic Spa.

*Tento dokument je určen pouze pro použití zaměstnanci Nu Skin Enterprises EMEA a nezávislými distributory. Nelze ho veřejně dále šířit.*